

## 사용설명서

# 펄스광선조사기

본제품을 구입해주셔서 진심으로 감사합니다.

본제품을 안전하고 정확하게 사용하기 위하여 사용전 충분히 숙지하신 후 사용하시기 바랍니다.

설명서를 읽고난 후에는 언제라도 볼수 있는 장소에 보관해 주십시오.

**본 제품은 의료기기이므로 특이체질은 반드시 의사와 상담후 사용하시기 바랍니다.**

모델명 : ANYMI IPL-1000

SKIN TONE  
SAFE CHART



사용가능

1~4단계



주의

위험

TITLE	PAGE
안전을 위한 주의사항	3
구성품	5
각부분의 명칭	6
사용전 준비사항	8
사용방법	9
AUTO & 무음기능	11
사용팁 & 주의사항	12
램프카트리지 교환방법	15
청소방법 및 보관방법	16
고장신고 전 확인사항	17
A/S 및 제품보증서	18
제품규격	19

안전한 사용을 위하여, 사용 전 사용설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.  
 사용설명서에 기재된 목적 이외의 용도로 사용하지 않도록 하여 주시기 바랍니다.  
 본 제품은 안전한 사용을 위해 위험관리에 기초하여 설계되어 있습니다.  
 사용 전 **안전을 위한 주의사항**을 잘 읽고 안전하게 사용하여 주시기 바랍니다.  
 여기에 표시한 주의사항은 사용자와 타인의 안전에 관련된 중요한 내용이므로  
 반드시 지켜주시기 바라며 그 표시와 의미는 다음과 같습니다.

### 안전을 위한 준비사항 표시



위험

잘못 사용하면 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있습니다.



경고

잘못 사용하면 경상을 입을 가능성이 있습니다.



주의

잘못 사용하면 상해 가능성 및 물적 손해가 발생할 가능성이 있습니다.  
 물적 손해라 함은 가옥, 가재 및 가축, 애완동물에 관련된 손해를 의미합니다.

### 제품 취급시 주의사항 표시



금지

제품 취급시 금지하는 사항입니다.



지시

위험상황을 예방하기 위하여 제품 취급시 반드시 지켜야 하는 사항입니다.



위험  
(Dangerous)

아래와 같은 체내 이식용 의료기기(Implantable Device)를 이식한  
 분께서는 기기에 오작동을 초래할 우려가 있기 때문에 반드시 사용을  
 금지 하여 주십시오.

- 페이스메이커 등 체내 이식된 의료용 전자기기
- 인공 심장등의 생명 유지용 의료용 전자기기
- 심전계 등의 장착형 의료용 전자기기
- 기타, 체내에 장착하는 의료용전자기기



▶ 아래의 병력이 있는 분께서는 사용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

- 과거에 피부암 또는 피부 악성 종양증을 앓았던 분
- 광 과민성 유발 의약품 등을 6주 이내에 사용하신 분
- 과거 3개월 이내에 방사선치료 또는 화학치료를 받은 분
- 시술부위에 문신이나 검은 점 등 피부색 이외의 짙은 색소가 있는 분
- 혈압에 이상이 있는 분
- 급성질환, 전염성질환, 결핵성질환의 증상을 가진 분
- 임신중인 분이나 출산 직후의 임신부
- 피부가 물리적 자극에 약하거나 상처가 쉽게 생기는 분
- 피부질환(아토피성 피부염, 염증 등)이 있거나 알레르기 체질인 분
- 19세 이하
- 해수욕이나 썬텐 후 일주일 이내 또는 일광욕 후 아픈 피부
- 염증, 상처, 데인 자국, 습진 등 피부 문제가 있는 분
- 성기 주변 등 민감한 장소
- 성형 및 문신 장소
- 심장 및 심장에 가까운 장소
- 근육의 외상 같은 병으로 인하여 염증을 일으키거나 부어 오른곳
- 화농성 여드름 부위
- 피부톤이 어둡거나 가까운 분 (표지의 피부톤차트 참조)
- 라식, 라섹을 수술 직후에는 사용을 금하며, 전문의와 상의하신 후에 사용

상기에 열거한 분 외에 체질에 문제가 있거나 특이 체질하신 분, 현재 요양 또는 치료중인 분은 사용 전 의사와 반드시 상담하여 주시기 바랍니다.

피부가 약한 분은 눈에 피지 않는 부위에 먼저 실험 후 이상이 없을 때 사용하여 주시기 바랍니다.

만일, 피부에 이상이 있을 시에는 즉시 사용을 중지 하여 주시고 전문의와 상담 하여 주시기 바랍니다.

음주 후 또는 약을 복용 중, 피로를 느낄 때는 사용을 자제 하여 주시기 바랍니다. 생리중인 분이 사용하게 되면 생리 불순 등의 부작용이 있을 수 있으니 생리가 끝난 후 사용하여 주시기 바랍니다.



▶ 전원 취급시 다음사항을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.


잘못하면 감전이나 화재가 발생 할 우려가 있습니다.

- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거워진 콘센트는 사용하지 말 것.
- 코드선 부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 말 것.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 할 것.
- 전원 플러그와 접촉 부분(헤드부)에 먼지가 붙어 있으면 잘 닦아 줄 것.
- 고온다습한 장소, 먼지가 많은 장소, 진동이 많은 장소, 직사광선이 직접 닿는 장소에서의 사용을 피할 것.
- AC100 ~ 240V, 60Hz 의 전원을 사용할 것
- 기기에 무리한 힘을 가하거나 떨어뜨리거나 외부에 충격을 가하지 말 것
- 본 제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 사용을 중지하고 콘센트에서 전원플러그를 뽑은 후 A/S나 본사로 연락할 것.
- 함부로 분해, 개조, 수리하지 말 것.
- 본체에 전원이 켜진상태에서 카트리지를 프로브에서 빼지 말것 (카트리지는 반드시 전원을 OFF한후 분리)


▶ 다음 사용을 위해 청소와 제품을 잘 정돈하여 보관하여 주세요.

- 사용후 카트리지와 피부가 닿았던 표면은 알코올로 깨끗하게 세척할 것
- 카트리지의 필터(석영)표면도 알코올로 깨끗하게 세척할 것
- 사용자 프로브 코드를 손에 돌돌 말은 상태로 사용하지 말고, 보관시에도 말리지 않도록 주의할 것 (프로브 코드 고장의 원인)


▶ 구성품이 모두 갖추어져 있는지 확인바랍니다.

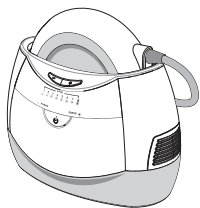



본체

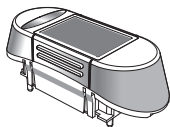

램프 카트리지

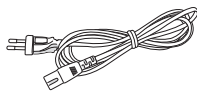



AC코드

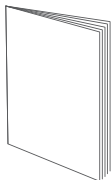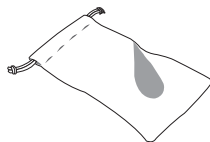사용설명서  
보증서시력보호용 고글  
(자외선차단)

고글 파우치

▶ 본 제품을 사용하기 전 아래의 설명을 보시고 숙지하여 주시기 바랍니다.

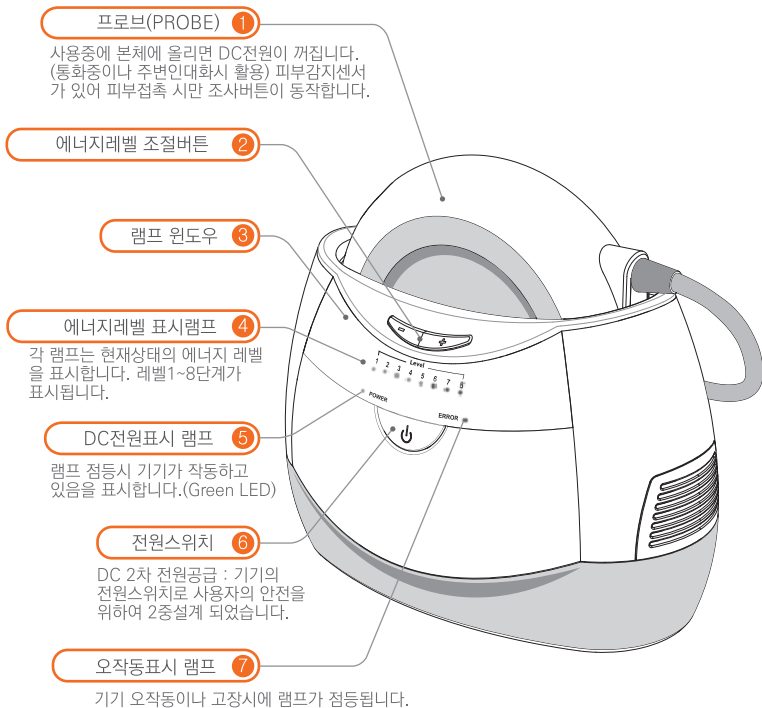

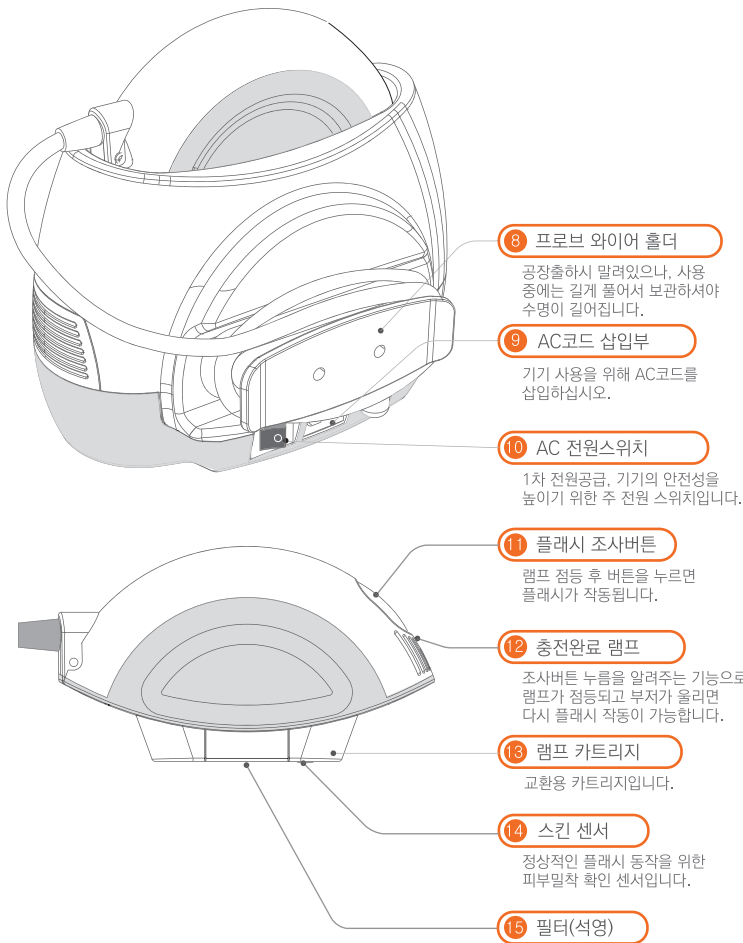

- 자동조사(AUTO)모드시에는 안전을 위해서 레벨1~5까지 설정가능합니다.(11p 참조)
- 무음(MUTE)모드일때에는 충전완료 부저가 울리지 않습니다.
- 본체와 프로브에는 돌다 냉각기능을 위한 팬이 설치되어 있습니다.

## 사용 전 준비사항

1. 사용 전 원하는 부위의 모발을 깨끗이 제거 합니다. (사용하기 24시간 전)  
단, 털을 뽑은후에 사용해서는 안되므로 털을 뽑지 마세요.
2. 제거 후 모발이 피부에 남지 않게 깨끗이 씻은 후 , 건조시켜 주세요.
3. 모발을 제거하지 않고 사용할 시에는 효과가 반감될 수 있습니다.
4. 선선한 환경(18~24℃)에서 사용하십시오.
5. 편안한 자세와 복장에서 사용하여 주세요.

시술 부위에 로션이나 냉각 젤 등을 바르면 고장의 위험이 있습니다.

단 , 냉찜용 얼음을 별도로 준비하시어 시술할 부위에 냉찜을 한 다음에 조사하시면 더 안전합니다.


## 사용 전 제품 준비사항

1. 프로브 와이어를 본체 뒷면 프로브 와이어 홀더에서 분리하세요.  
(프로브 와이어는 길게 늘어뜨려 사용하세요.)
2. 램프 카트리지가 프로브에 제대로 장착되어 있는지 확인해 주세요.  
(카트리지가교환방법 15page 참조)
3. 프로브를 프로브 거치대에 바르게 올려 주세요.
4. 코드를 콘센트에 꽂아 주세요.
5. 눈의 시력 보호(자외선 차단)를 위해 고글을 착용해 주세요.(단, 사용환경이 어두운데서 고글을 착용하시면, 피부상태를 확인할 수없어 위험할 수 있으니 반드시 자연광에 가깝도록 실내인 경우 조명을 켜고 밝은 장소에서 사용하세요.)
6. 냉찜용 얼음을 준비해 주세요.




## 사용방법

1. 본체 뒤편의 AC전원스위치를 ON(O)으로 하면 본체 팬(Fan)이 작동합니다.

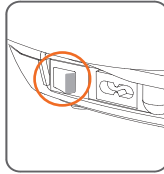


2. 프로브를 거치대에서 들어 올리고 본체 전원 버튼을 누릅니다.

프로브가 거치대에 놓여져 있을 때에는 본체 전원 버튼이 작동하지 않습니다. 이때 프로브 부분의 팬(Fan)도 작동하면서 에너지 레벨이 자동적으로 설정되며, 플래시를 위한 충전(약4초)이 됩니다.

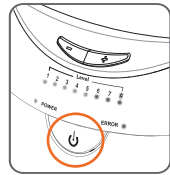

3. 본체 앞면의 (+),(-)버튼으로 1~8 단계의 레벨을 선택합니다.

에너지 레벨을 바꿀 때는 본체 앞면의 (+),(-) 버튼으로 조절하고 처음 사용하시는 분은 가능한 「레벨 1」부터 사용하여 주세요.  
(자세한 레벨설정은 12page 참조)

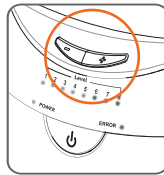

4. ‘삐~’ 소리는 준비가 된 상태이니 ‘삐~’ 소리가 울린 후 **사용부위에 밀착시키고 플래시 버튼을 누릅니다.**

안전한 사용을 위해 프로브센서가 피부에 밀착되었을때만 작동됩니다. 조사(Flash) 직후는 프로브를 피부로부터 떼어주세요. 계속해서 피부에 밀착되어 있으면 화상의 우려가 있습니다.



5. 사용후 레벨에 따라 약 4~7초후 '삐~'소리가 나고 **충전완료램프가 켜지면 다음 사용이 가능합니다.**

카트리지 양쪽 플래시 가이드라인을 이용하여 플래시범위를 확인하면서 조사하세요.  
 시술 부위에 로션이나 냉각 젤 등을 바른후 고장의 위험이 있습니다.  
 단, 냉찜질용 얼음을 별도로 준비하시어 조사한 부위에 냉찜질을 한 뒤, 다음 부위에 조사하시면 더 안전합니다.



6. 사용 후 프로브를 본체의 거치대에 올려 놓으면 본체 전원과 프로브 팬이 정지합니다. 이때 냉각을 위해 본체 팬은 계속 작동합니다.  
 또는 사용중 전화를 받거나 주변사람과 대화시 일시중지하고 싶을때에도 프로브를 거치대에 올려놓으면 정지됩니다.

7. 전원 스위치와 본체 뒷면의 AC전원스위치를 끕니다.  
 전원 코드를 콘센트에서 분리 시킨 후, 프로브 와이어는 길게 1~2번 접어서 보관하시면 와이어의 수명이 길어집니다.

프로브코드 정리시 홀더에 힘을 가해 당겨 감지 마세요. 단선의 원인이 됩니다.


## AUTO 기능

플래시 버튼을 누르지 않고도 자동으로 조사가 가능한 기능입니다.

버튼 누르는 수고를 덜 수 있습니다.

단, 얼굴에 사용시는 수동모드로 사용해야 합니다. 이유는 고장으로 인해 자동발사로 눈에 빛이 들어갈 수 있습니다.

1. 제품 뒷면의 AC전원 스위치가 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 제품 정면의 에너지 레벨 조절 버튼 (-)와 (+)를 동시에 누른 상태에서 제품 뒷면의 AC전원 스위치를 켭니다.
3. '삐~' 소리가 울린 다음 램프의 스킨센서를 피부에 대면 자동으로 조사가 됩니다.
4. 안전을 위해 AUTO 기능에선 1~5단계만 허용됩니다.
5. 프로브를 본체에 놓거나 전원버튼을 누르면 오토기능이 해제되면서 전원이 꺼집니다.

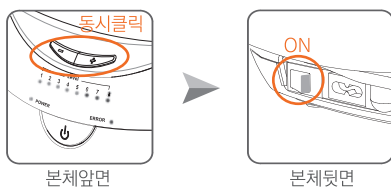


## 무음 기능

충전이 완료되어 조사가 가능한 상태를 알려주는 '삐~'음이 안 나오게 하는 기능입니다.

심야시간대이거나 개인 프라이버시가 요구되는 경우에 사용하면 유용합니다.


1. 제품 뒷면의 AC전원 스위치가 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 제품 정면의 전원 스위치를 누른 상태에서 뒷면의 AC전원 스위치를 켭니다.
3. 무음 기능으로 제품이 켜집니다.
4. 충전이 완료됐다는 '삐~' 음이 나오지 않습니다. (단, 팬의 회전음은 있으며, 정상입니다.)
5. 프로브를 본체에 놓거나 전원버튼을 누르면 무음기능이 해제되면서 전원이 꺼집니다.

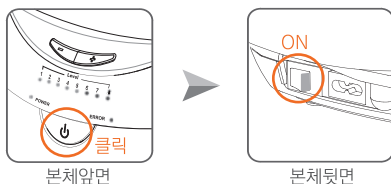

\* AUTO 기능과 무음 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.

## 레벨설정

1. 본 제품은 8단계의 에너지 레벨(Energy Level) 설정이 가능합니다.  
카트리지는 제모용 H형 카트리지가 기본으로 포함되어 있습니다. ( H형 : 1 ~ 8레벨 )  
카트리지 피부용 D형은 옵션입니다(별도구입)
2. 레벨(Level)이 높을수록 높은 효과를 얻을 수 있지만 피부의 홍조나 통증 등이 있을 수 있으니 피부상태에 따라 레벨을 낮추어서 사용하여 주십시오.
3. 처음 사용하는 분은 「레벨1」부터 사용하는 것을 권장합니다.  
최초 작동 시에는 에너지 레벨이 「레벨1」에 자동적으로 설정되어 있습니다.  
에너지 레벨은 (+)(-)버튼으로 설정하여 주십시오.
4. 피부색이 어두운 분들은 통증을 유발하거나 화상을 입을 수 있으니 사용을 자제하여 주십시오.  
표지에 인쇄된 'SKIN TONE SAFE CHART' 색상을 보시고 사용가능한 레벨을 확인해 주십시오.

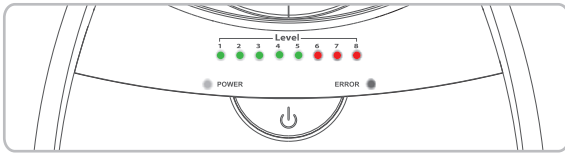

Level 1~5 ; 녹색 LED / Level 6~8 ; 적색 LED

### 상식 열이완시간이란?

물체가 열을 흡수하면 그 온도가 올라가는 한편 열을 주변으로 발산하여 식는 과정이 진행된다. 같은 열을 가할 경우 물체의 부피가 클수록 온도가 일정 수준으로 상승하는데 시간이 오래 걸릴 뿐 아니라, 열의 공급을 중단한 후 원래 상태로 온도가 하강하는 데에도 시간이 오래 걸린다.

어떤 물체에 열이 가해져서 온도가 올라간 뒤 식는 과정이 진행되어 올라간 온도의 반까지 떨어지는데 걸리는 시간을 열 이완 시간이라고 한다.

열이완 시간은 개인의 차가 있을 수 있으므로 조금하게 조사(Flash)를 하지 않는것이 피부건강에 좋습니다.

## 효과적인 사용방법

### ▶ BODY(제모형 카트리리지 : H형)에 사용시

1. 하루전날 모발을 깨끗이 제거합니다. 단 모발을 뽑거나 뽑은 부위에 사용하시면 안됩니다.
2. 사용전에는 피부에 부드러운 폼으로 깨끗이 세안합니다.
3. 건성피부는 레벨을 최대한 낮게 조사(Flash)하십시오.
4. 사용하시면서 피부에 홍반 등이 발생하면 사용을 멈추고, 차가운 팩과 보습제 등으로 열감을 낮춰야 합니다.  
홍반 부위는 피부에 따라 개인차가 있지만 2~3일 후면 모두 없어집니다.  
만약 홍반 부위가 신경이 쓰인다면 가까운 병원을 방문하여 전문의와 상의하십시오.
5. 동일 부위를 연속으로 사용하는 것은 금하며, 피부의 상태에 따라서 1회 시술시 1~3회 사용하며, 1주일에 1~3회 일정한 간격으로 나눠 사용하십시오.
6. 시술 후, 보습제와 자외선 차단제를 꼭 바른후 옷소매 또는 바지 등으로 시술부위를 가리고 생활 하시면 색소침착등으로 부터 보호가 될 수 있어 권장합니다.

\* BODY 사용시 눈에 보안경을 꼭 착용하십시오.

### ▶ FACE(피부용 카트리리지 : D형 별도구매품)에 사용시

1. 사용전에는 세안(클렌징 및 각질제거)을 꼭 하십시오.
2. 따뜻한 스팀 또는 타올로 피부를 진정 시킨 후 사용하세요.
3. 낮은 레벨(1~2레벨 권장)에서 사용하시되, 눈썹이나 머리카락에 손상이 없도록 주의하시고, 코와 볼등에 시술 시에는 카트리지의 필터(석영)가 피부에 닿지 않도록 조심하십시오.  
(필터의 표면이 뜨거워 화상을 입을 수 있습니다.)
4. 동일 부위를 연속으로 사용하는 것은 금하며, 피부상태에 따라서 1회 시술시 1~3회만 사용하며, 1주일에 1회 사용을 권장합니다.
5. IPL사용후, 비타민C의 사용을 금하며, 만약 사용하고 싶다면 격주제로 사용 할 것을 권장합니다.  
(1주일은 IPL사용후 보습제 및 팩사용, 다음주는 IPL사용을 금하며, 비타민C등을 사용)
6. 시술 후, 차가운 보습제 / 마스크팩을 이용하시면 피부건강에 좋습니다.
7. 시술 후, 선크림을 바르고 외출을 하십시오.

\* FACE에 사용시 눈에 보안경을 사용하시고, 보안경을 벗고 사용할 경우는 빛이 눈에 들어가지 않도록 주의 하십시오.

\* 조사시 램프카트리지의 열발생이 많아 장시간 연속사용시 화상의 우려와 램프가 터질 우려가 있으므로 약 20~30분(200회~300회)정도 조사한 후엔 꼭 전원을 끄고 약 3~5분간 휴식후 사용하시기 바랍니다.

## 사용후 주의사항

### ▶ IPL사용후 조심해야 할 사항입니다.

- 시술 후 열감을 낮추도록 보습제를 바르세요. (지속적으로 건조한 피부에 발라줍니다.)
- 시술 후 온수 목욕은 삼가하세요.
- 시술부위를 문질러서 자극을 주지 마세요.
- 붉은점이 남아있는 동안은 직사광선을 피하고, 색소침착 방지를 위해 자외선 차단제를 사용하세요.
- 홍반이 2~3일 지속될수 있지만 호전되므로 안심하시고, 불편하면 가까운 병원을 방문하여 전문의와 상담하세요.
- 4주이상은 자외선에 노출되지 않게 소매있는 옷과 바지를 착용하고 선크림을 꼭 발라 주세요.
- 거드름이 시술후에 제한제(땀억제 약)의 사용을 2주일정도 삼가하세요.

### ▶ 램프 카트리지 사용시 다음 사항을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

- 본 제품을 사용하는 경우는 시력 보호를 위해 자외선차단 고글을 반드시 착용해 주시기 바랍니다.
- 피부색에 따른 레벨선택 및 예외조항은 설명서 표지를 참조하여 주십시오.
- 조사를 오래하다 보면 조사부의 석영이 뜨거워질 수 있으므로 이때는 조금 기다렸다가 열이 식으면 다시 조사해야 합니다.
- 레벨선택은 신중히 해야 합니다.
- 램프카트리지에서 나오는 빛을 눈으로 직접 보거나 사람의 눈을 향해 사용하지 않도록 하여 주시기 바랍니다.
- 본 제품의 사용 전, 사용 후에 꼭 램프 상태를 확인해 주시기 바랍니다.
- 램프카트리지에 착색 또는 흑색반점의 오염이 부착된 경우나 파손되어 있는 경우 반드시 램프카트리지를 새 제품으로 교환하여 주시기 바랍니다.
- 사용 중에는 카트리지를 피부에 대고 강하게 누르지 마십시오.
- 제품 사용 시 환부 한 곳에 집중조사하여 사용하지 마십시오.

### ▶ 본 제품은 다음과 같은 증상이 발생할 우려가 있습니다.

- 화상이나 물집이 발생할 우려가 있습니다.
- 사용한 부위에 열이나 따끔거리는 통증, 가려움을 일으킬 수 있습니다.
- 사용직후나 24시간 이내에 시술한 부위가 홍조를 띄거나 부풀어 오르는 경우가 있으나, 2~3일이 경과되면 모두 없어집니다.
- 증상이 치료 될 때까지 많은 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 사용 직후에 피부색이 진하게(색소침착) 되는 일이 있습니다.
- 사용 중에 따끔거리는 통증을 느낀 경우, 또는 사용 후 피부가 홍조를 띄었을 경우 곧바로 차가운 물수건이나 얼음 등으로 냉찜질 등 마사지를 하여 주시기 바랍니다. (전문의와 상의할 것을 권장합니다.)
- 사용 후 외출시 자외선 차단제 사용을 권장합니다.

### ▶ 다음과 같은 증상이 발생한 경우는 시술을 멈추고 전문의와 상담하여 주시기 바랍니다.


- 화상이나 수포가 발생한 경우
- 사용 부위가 빨갧게 일어나고 가려움 등이 발생한 경우
- 색소침착이 장기간(2~3일)에 걸쳐 일어난 경우

## 램프 카트리지는 소모품입니다.


램프 카트리지 안쪽에 착색 또는 흑색 반점 등이 생기거나 램프가 정상 동작하지 않을시 램프의 수명이 다 된것이니 새로운 카트리지를 구입하여 사용하시기 바랍니다.

(램프수명이 다 되었는데도 계속 사용시 램프가 터질수도 있으니 주의하십시오.)

1. 반드시 본체의 AC전원 스위치를 OFF시킨 후 전원 코드를 콘센트에서 분리하여 주십시오.

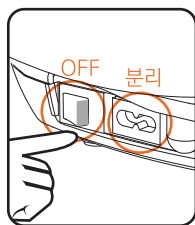


2. 사용 직후라면 약 5분후에 프로브에 장착되어 있는 램프 카트리지의 양측을 손으로 잡고 좌우로 가볍게 흔들며 프로브에서 램프 카트리지를 빼냅니다.

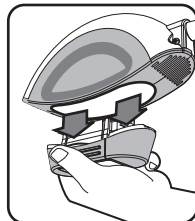

3. 사용 후의 카트리지는 폐기하시고 새로운 램프 카트리지를 개봉하여 카트리지 단자와 프로브에 일치하도록 장착합니다.

카트리지를 보면 Pin이 3개, 2개로 방향성을 알수 있게 되어 있습니다. 소켓의 구멍숫자와 맞게 위치시키고 끼으면 쉽게 장착하실 수 있습니다.

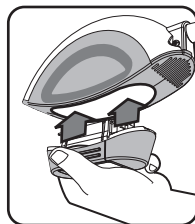

4. 램프의 수명은 레벨이 올라갈수록 전압이 상승하므로 수명도 짧아집니다. 단, 레벨1에서는 40,000회를 보장합니다.

## 청소방법

- 1. 본 체** : 사용 후에 본체뒤의 AC전원 스위치를 OFF시킨 후 전원 코드를 분리하여 부드러운 천 등으로 가볍게 먼지나 오염물을 닦아 주십시오.
- 2. 프로브** : 사용이 끝난후에는 반드시 램프 부분을 청소하여 주십시오.  
물로 희석한 중성 세제 또는 알코올을 부드러운 천에 묻혀 램프 유리면에 붙은 이물질을 천천히 닦아낸 후 마른 헝겊 등으로 가볍게 닦아내고 건조시켜 보관하시기 바랍니다.

오염부가 심하면 시중에 판매되는 소독용 알코올을 부드러운천에 묻혀서 사용하십시오.

제품 청소 시 다음 사항은 반드시 숙지하시기 바랍니다.



경고

본체, 프로브, 램프 카트리지를 물로 청소하지 마십시오. 감전이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.



주의

청소시 신나, 벤젠류를 사용하면 변형, 변색의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.



## 저장방법

1. 본 기기에 대한 보관 조건은 통풍이 잘되고 습하지 않으며, 유해화학성분이 없는 곳에 보관한다.
2. 직사광선이 없는 곳에 보관한다.
3. 소비자권장 보관온도 5~35°C, 소비자권장 보관습도 20~80%



- Q. 전원이 들어오지 않아요.
- A. 전원코드가 본체와 콘센트에 꼭 끼워져 있는지 확인하세요.
  - A. 제품 뒷면의 AC전원 스위치가 ON 상태인지 확인하여 주세요.
  - A. 프로브를 거치대에서 들어 올리고 본체 전원버튼을 누르세요.
- 
- Q. 플래시 버튼을 눌러도 빛이 나오지 않아요.
- A. 프로브의 충전 완료 램프가 녹색으로 점등되었는지 확인하세요.
  - A. 10초가 지나도 충전 완료 램프가 점등 되지 않는 경우에는 본체 전원을 끈 후 다시 켜주세요.
  - A. 에러(Error) 램프가 점등되었다면 본체의 전원을 끈 후 다시 켜주세요.
  - A. 피부에 플래시 면이 바르게 밀착되어 있는지 확인하세요. 사용부위에 프로브를 평행으로 밀착시킨 후 버튼을 누르세요.
  - A. 프로브와 카트리지가 바르게 장착되어 있는지 확인하세요.
  - A. 장시간 사용하면 본체가 뜨거워져 플래시가 되지 않는 경우가 있습니다. 이 경우 본체의 전원을 끈 후 30분 정도 기기를 냉각시켜 주세요.
- 
- Q. 에러 램프가 점등됐어요.
- A. 카트리지가 장착이 확인되지 않는 경우가 있습니다. 뒤쪽 메인 스위치를 OFF하고 카트리지를 장착을 확인한 다음 전원을 다시 ON으로 해주세요.
- 
- Q. 전원은 들어오지만 충전 완료 램프가 점등 하지 않아요.
- A. 에러 램프를 확인 해주세요. 10초가 지나도 충전 완료 램프가 점등하지 않으면 전원을 껐다가 다시 켜주세요. 오랜 시간 사용하셨다면 전원을 OFF하고 30분 정도 기기를 식혀주세요.



- ▶ 품목명 ; 펄스광선조사기
- ▶ 제조번호 ; 제품 하단 및 포장박스에 표기
- ▶ 보증기간 ; 본체 구입일로부터 1년(램프카트리지는 소모품이므로 보증에서 제외)

- ▶ 고객명 ;
- ▶ 주소 ;
- ▶ 전화 ;

- ▶ 판매점상호 ;
- ▶ 주소 ;
- ▶ 전화 ;
- ▶ 고장 및 수리내역 ;

▶ 보증규정

1. 보증기간내에 사용설명서대로 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장발생시, 고장성 불량에 한하여 무상서비스를 받을수 있습니다. ( 단, 소모품, 부속품 등은 제외)
2. 보증기간내에도 다음과 같은 경우는 무상서비스가 불가능합니다.
  - ① 보증서가 없을 경우, 또는 보증서에 구매년월일, 고객명, 판매점명 등이 없거나 위조하여 작성한 경우.
  - ② 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 및 손상된 경우.
  - ③ 사용설명서의 주의사항을 지키지 않아서 고장난 경우.
  - ④ 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장난 경우.
  - ⑤ 푸로맥스에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하거나 이동중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 경우.
3. 프로브 코드선과 스위치 류는 교체품으로 사용자의 사용습관 및 환경에 따라 교체 주기가 단축 될 수 있으며, 보증기간내에도 소비자 과실로 판명될 시 유상 청구될 수 있습니다.
4. 보증서비스는 구매한 판매점 또는 당사에 의뢰하십시오.
5. 보증서는 재발행되지 않으니 분실하지 않도록 보관하여 주십시오.
6. 이 보증서는 대한민국에서만 적용됩니다.
7. 보증서비스는 개인용으로 한하여 유효합니다.  
SPA, 에스테틱 하우스 등 영업용도로 전환하여 사용한 경우 보증서비스를 받을 수 없습니다.

▶ 본 제품은 의료기기입니다.

품목명	펄스광선조사기
모델명	ANYMI IPL-1000
전원	AC100~240V, 60Hz, 200VA
광원	제논램프
카드리지수명	40,000회 (Level1 기준)
피부질환용 플래시크기	3.1cm x 2.1cm
충전시간	3.5초 ~ 6.5초 / 1플래시
냉각방법	공냉식(WIND)
시력보호용 고글	자외선 차단용
본체크기	196mm(W) x 139mm(D) x 180mm(H)
중량	1,416Kg(본체 1,3Kg, 핸드피스 0.08Kg, 램프카드리지 0.036Kg)
제조원	(주)푸로맥스
제조국	대한민국

▶ 의료기기법에 의한 표시사항

1. 품목명 : 펄스광선조사기
2. 제품명 : ANYMI IPL-1000
3. 제조원 : (주)푸로맥스
4. 주소 : 경기도 부천시 오정구 산업로7번길 21 9층(오정동, 일우빌딩)
5. 제조업 허가번호 : 제2594호
6. 제조품목 허가번호 : 제10-540호
7. 제조번호 : 제품 생산 시 기재
8. 제조년월일 : 제품 생산 시 기재
9. 중량 : 1,416Kg(본체 1,3Kg, 핸드피스 0,08Kg, 램프카드리지0.036Kg), 포장단위:1대
10. 사용방법 및 사용상의 주의사항 : 첨부문서에 기재
11. 제품의 사용목적 : 에너지의 세기가 큰 펄스형태의 빛(IPL)을 방출시켜 제모 및 피부질환치료 등을 위해 사용하는 기구
12. 본 제품은 '의료기기' 임
13. 그 밖의 의료기기의 특성 등 기술정보에 관한 사항
  - 전기적 정격 / 정격전압 : AC100 ~ 240V, 60Hz / 소비전력:200VA
  - 전기충격에 대한 보호형식 및 정도 : 2급, BF형 기기
  - 광선 출력 정확도 : Level별 출력에 대하여 ±20% 이내
  - 펄스폭 : 6ms ±10%
  - 출력 안정성 : ±20%
  - 광선의 조사 면적 : 21mm X 31mm ±10%
14. 작성연월 : [제정]2010년 5월 31일, (4판)2015년 7월22일

