


# USER MANUAL

[www.anymi.co.kr](http://www.anymi.co.kr)



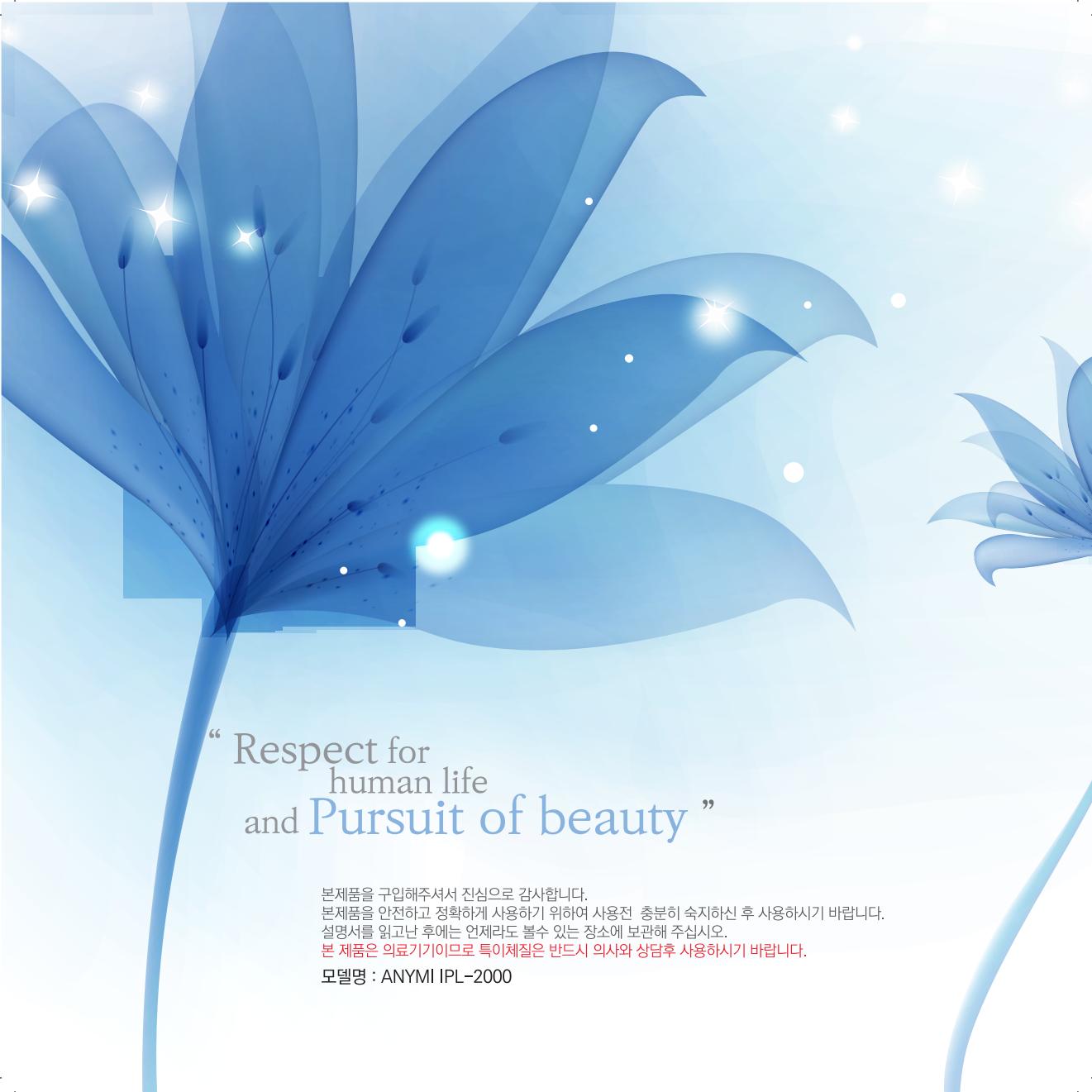

“ Respect for  
human life  
and Pursuit of beauty ”

본제품을 구입해주셔서 진심으로 감사합니다.

본제품을 안전하고 정확하게 사용하기 위하여 사용전 충분히 숙지하신 후 사용하시기 바랍니다.

설명서를 읽고난 후에는 언제라도 볼수 있는 장소에 보관해 주십시오.

본 제품은 의료기기이므로 특이체질은 반드시 의사와 상담후 사용하시기 바랍니다.

모델명 : ANYMI IPL-2000

TITLE	PAGE
안전을 위한 주의사항	4
구성품과 각 부분의 명칭	6
사용전 준비사항	8
사용방법	9
AUTO & 무음기능	10
레벨설정	11
사용팁 & 주의사항	12
램프카트리지 교환방법	15
청소방법 및 보관방법	16
고장신고 전 확인사항	17
A/S 및 제품보증서	18
제품규격	19

안전한 사용을 위하여, 사용 전 사용설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.  
사용설명서에 기재된 목적 이외의 용도로 사용하지 않도록 하여 주시기 바랍니다.  
본 제품은 안전한 사용을 위해 위험관리에 기초하여 설계되어 있습니다.  
사용 전 **안전을 위한 주의사항**을 잘 읽고 안전하게 사용하여 주시기 바랍니다.  
여기에 표시한 주의사항은 사용자와 타인의 안전에 관련된 중요한 내용이므로  
반드시 지켜주시기 바라며 그 표시와 의미는 다음과 같습니다.

### 안전을 위한 주의사항 표시

	잘못 사용하면 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있습니다.
	잘못 사용하면 경상을 입을 가능성이 있습니다.
	잘못 사용하면 상해 가능성 및 물적 손해가 발생할 가능성이 있습니다. 물적 손해라 함은 가옥, 가재 및 가축, 애완동물에 관련된 손해를 의미합니다.

### 제품 취급시 주의사항 표시

	제품 취급시 금지하는 사항입니다.
	위험상황을 예방하기 위하여 제품 취급시 반드시 지켜야 하는 사항입니다.

	아래와 같은 체내 이식용 의료기기(Implantable Device)를 이식한 분께서는 기기에 오작동을 초래할 우려가 있기 때문에 반드시 사용을 금지 하여 주십시오.
위험 (Dangerous)	<ul style="list-style-type: none"><li>- 페이스메이커 등 체내 이식된 의료용 전자기기</li><li>- 인공 심장등의 생명 유지용 의료용 전자기기</li><li>- 심전계 등의 장착형 의료용 전자기기</li><li>- 기타 체내에 정착하는 의료용전자기기</li></ul>



▶ 아래의 병력이 있는 분께서는 사용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

- 과거에 피부암 또는 피부 악성 종양증을 앓았던 분
- 광 과민성 유발 의약품 등을 6주 이내에 사용한 분
- 과거 3개월이내에 방사선치료 또는 화학치료를 받은 분
- 시술부위에 문신이나 검은점 등 피부색 이외의 짙은 색소가 있는 분
- 혈압에 이상이 있는 분
- 급성질환, 전염성질환, 결핵성질병의 증상을 가진 분
- 임신중인 분이나 출산 직후의 임산부
- 피부가 물리적 자극에 약하거나 상처가 쉽게 생기는 분
- 피부질환(아토피성 피부염, 염증 등)이 있거나 알레르기 체질인 분
- 19세 이하
- 해수욕이나 썬텐 후 일주일 이내 또는 일광욕 후 아픈 피부
- 염증, 상처, 데인 자국, 습진 등 피부 문제가 있는 분
- 성기 주변 등 민감한 장소
- 성형 및 문신 장소
- 심장 및 심장에 가까운 장소
- 근육의 외상 같은 병으로 인하여 염증을 일으키거나 부어 오른 곳
- 학농성 여드름 부위
- 피부문이 어둡거나 가까운 분 (표지의 피부토치트 참조)
- 라식, 라섹을 수술 직후에는 사용을 금하며, 전문의와 상의하신 후에 사용

상기에 열거한 분 외에 체질에 문제가 있거나 특이 체질이신 분, 현재 요양 또는 치료중인 분은 사용 전 의사와 반드시 상담하여 주시기 바랍니다.

피부가 약한 분은 눈에 띠지 않는 부위에 먼저 실험 후 이상이 없을 때 사용하여 주시기 바랍니다.

만일, 피부에 이상이 있을 시에는 즉시 사용을 중지 하여 주시고 전문의와 상담하여 주시기 바랍니다.

음주 후 또는 약을 복용 중, 피로를 느낄 때는 사용을 자제 하여 주시기 바랍니다.

생리중인 분이 사용하게 되면 생리 불순 등의 부작용이 있을 수 있으니 생리기 끝난 후 사용하여 주시기 바랍니다.



▶ 전원 취급시 다음사항을 반드시 지켜 주시기 바랍니다. (감전 화재 발생 우려)

- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거워진 콘센트는 사용하지 말 것.
- 코드선 부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 말 것.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 둘려 막기하지 않도록 할 것.
- 전원 플러그와 접촉 부분(헤드부)에 먼지가 들어 있으면 잘 닦아 줄 것.
- 고온다습한 장소, 먼지가 많은 장소, 진동이 많은 장소, 직사광선이 직접 닿는 장소에서의 사용을 피할 것.
- AC100 ~ 240V의 전원을 사용할 것
- 기기에 무리한 힘을 가하거나 떨어뜨리거나 외부에 충격을 가하지 말 것
- 본 제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 사용을 중지하고 콘센트에서 전원플러그를 뽑은 후 A/S나 본사로 연락할 것.
- 함부로 분해, 개조, 수리하지 말 것.
- 본체에 전원이 커진상태에서 카트리지를 프로브에서 빼지 말것  
(카트리지는 반드시 전원을 OFF한후 분리)

▶ 다음 사용을 위해 청소후 제품을 잘 정돈하여 보관하여 주세요.

- 사용후 카트리지와 피부가 닿았던 표면은 알코올로 깨끗하게 세척할 것
- 카트리지의 필터(석영)표면도 알코올로 깨끗하게 세척할 것
- 사용시 프로브 코드를 손에 둘둘 막은 상태로 사용하지 말고, 보관시에도 말리지 않도록 주의할 것 (프로브 코드 고장의 원인)

## 구성품과 각 부분의 명칭

- 구성품이 모두 갖추어져 있는지 확인바랍니다.



본체1대



제모용 램프카트리지 1개  
(프로브에 장착되어 있음)



AC전원코드 1개




사용설명서(보증서)




시력보호용 고글 1개



고글 파우치

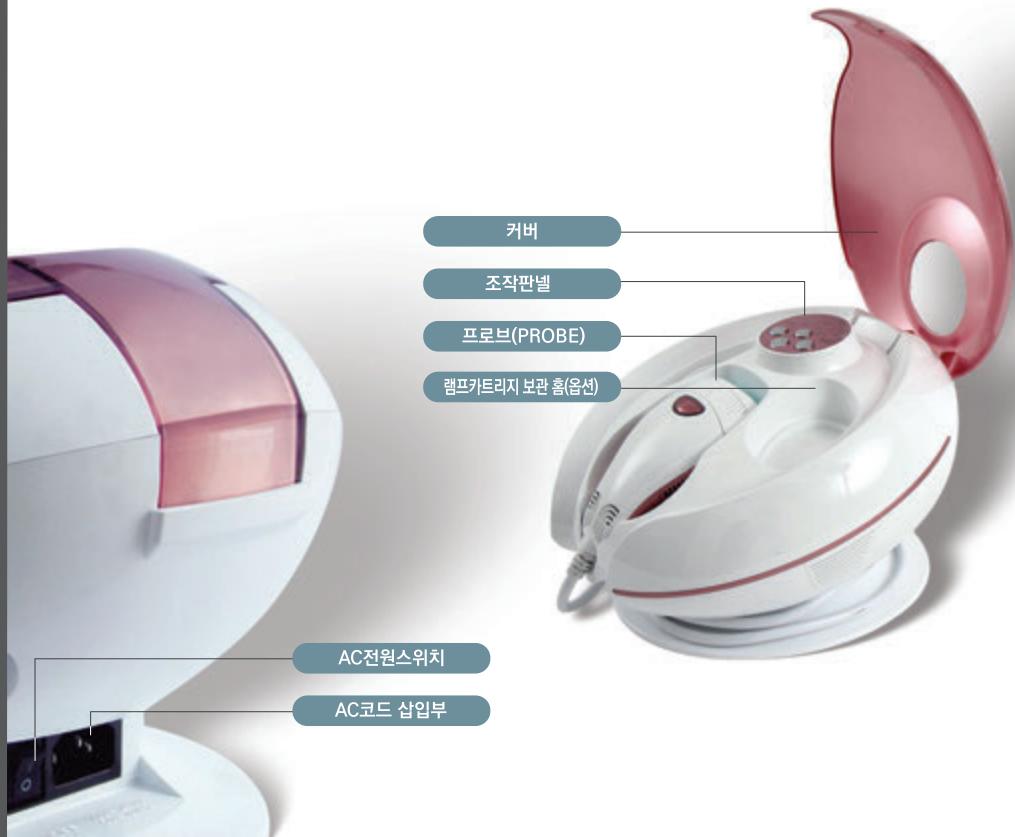

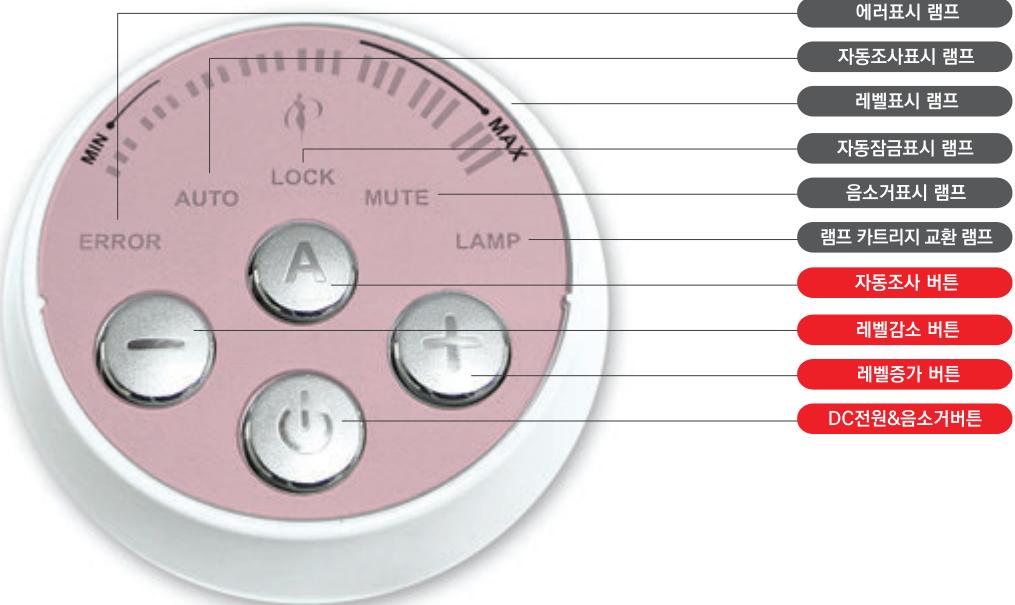

## 사용전 준비사항

1. 사용 전 원하는 부위의 모발을 깨끗이 제거 합니다. (사용하기 24시간 전) 단, 털을 뽑은후에 사용해서는 안되므로 털을 뽑지 마세요.
2. 제거 후 모발이 피부에 남지 않게 깨끗이 씻은 후 , 건조시켜 주세요.
3. 모발을 제거하지 않고 사용할 시에는 효과가 반감될 수 있습니다.
4. 선선한 환경(18~24 C)에서 사용하십시오.
5. 편안한 자세와 복장에서 사용하여 주세요.

시술 부위에 로션이나 냉각 젤 등을 바르면 고장의 위험이 있습니다.  
단 , 냉찜질용 얼음을 별도로 준비하시어 시술할 부위에 냉찜을 한 다음에 조사하시면  
더 안전합니다.




## 사용 전 제품 준비사항

1. 본체 밑면에 있는 프로브 와이어를 시계방향으로 돌려 풀어 주세요.(프로브 와이어는 길게 늘어뜨려 사용하세요.)
2. 램프 카트리지가 프로브에 제대로 장착되어 있는지 확인해 주세요. (카트리지교환방법 15page 참조)
3. 프로브를 프로브 거치대에 바르게 올려 주세요.
4. 코드를 콘센트에 꽂아 주세요.
5. 눈의 시력 보호(자외선 차단)를 위해 고글을 착용해 주세요.(단, 사용환경이 어두운데서 고글을 착용하시면, 피부상태를 확인할 수 없어 위험할 수 있으니 반드시 자연광에 가깝도록 실내인 경우 조명을 켜고 밝은 장소에서 사용하세요.)
6. 냉찜용 얼음을 준비해 주세요.


## 사용방법

- 1.** 프로브는 프로브 거치대에서 윗쪽으로 바르게 옮겨 빼내어 주세요.  
(제품을 구입하면 기본형 카트리지가 프로브에 장착되어 있습니다.)

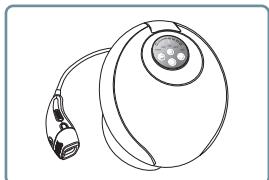


- 2.** 프로브에 원하시는 램프 카트리지를 장착하여 주세요.  
(15page 램프카트리지 교환방법 참조)

프로브에서 "딸깍" 소리가 나도록 알맞게 삽입하여 주세요.  
잘못 삽입하여 카트리지가 손상될 경우 교환 및 환불이 안 되오니  
주의하여 주시기 바랍니다.

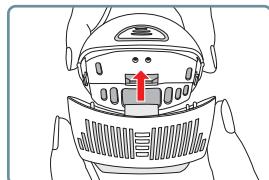

- 3.** 코드를 콘센트에 꽂으시고 뒤쪽에 AC 전원스위치를  
눌러주세요.

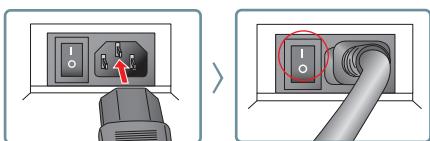

- 4.** 본체의 DC전원 버튼 을 2초정도 길게 누릅니다.  
(이때 어린이보호를 위한 안전차단장치가 작동되어 전원은 커지지만 LOCK LED 가 커집니다.)



버튼을 동시에 누르면 LOCK기능이 해제되면서 1레벨 LED가 자동으로 설정됩니다.

- 5.** 에너지 레벨을 바꿀때는 버튼으로 설정을 변경하시고 프로브를 피부에 대고 조사버튼을  
누르면 됩니다.

안전을 위해서 처음 조사시에는 5레벨까지만 허용이 되며, 1회 조사한 후에는 6~8레벨로 옮겨서  
사용하실 수 있습니다. 조사 후, “삐~” 소리가 나오고 프로브 충전램프 LED가 커지면 다시 조사가 가능합니다.  
(자세한 레벨설정은 11page 참조)

6. 반드시 센서 부분이 피부에 밀착되게 해서 조사합니다. 카트리지 양쪽 끝부분의 센서 중 한 부위만 피부에 닿아도 조사가 됩니다. ( 양쪽모두 피부에서 떨어지면 램프조사가 되지 않습니다.)

**안전기능** : 전원을 켠 상태에서 10분동안 사용을 하지 않을 경우 자동으로 전원이 꺼집니다.

**발산횟수 제한 기능** : 레벨1단계를 기준으로 약 60,000 Shot의 수명을 가지고 있습니다.  
(6~8단계로 연속사용시에는 12,000Shot이하로 떨어질 수 있습니다.)  
카트리지 사용횟수는 각 단계별로 상이하며, 단계별 수명에 최대 90%에 도달하면  
램프교환 LED가 점멸이 되고, 카트리지의 계속 사용은 가능하나 카트리지 수명이  
다 되었음을 알려주는 것으로, 새로운 카트리지로 교환후 사용하시기 바랍니다.

램프카트리지 수명이 100%가 되면 교환램프가 점멸하고 레벨표시 램프가 꺼집니다.  
( 이때 램프조사가 되지 않고 전원 OFF만 가능합니다. 다시 DC전원을 켜면  
램프카트리지 교환램프가 점멸하면서 레벨표시 램프가 켜지지 않습니다.)

### AUTO모드 (자동조사 기능)

- 사용자의 편의를 위하여 조사버튼을 누르지 않아도 자동으로 조사되는 AUTO기능이 있습니다.

전원이 켜진 상태에서  버튼을 누르면 AUTO LED가 켜지고 자동조사 상태가 됩니다.

AUTO모드에서는 1회 조사 후 다시 피부에 대었을때 안전을 위하여 약 6초 이후에 다시 조사가 되며, 5단계까지만  
AUTO기능이 허용됩니다. 6단계이상 레벨에서 AUTO버튼을 누르면 자동으로 1레벨로 이동합니다.  
( AUTO모드 5단계에서 레벨증가 버튼을 누르면, ERROR LED 가 점등되면서 5단계이상 레벨변경이 안됩니다. )

AUTO기능을 해제하고 싶은 경우  버튼을 다시 누르면 됩니다.

### MUTE모드 (음소거 기능)

- 사용자의 편의를 위하여 조사 준비가 되었다는 “삐~” 소리를 나지 않게 하는 기능이 있습니다.

전원이 켜진상태에서  버튼을 짧게 (1초이내) 누르면 MUTE LED가 켜지고 음소거 상태가 됩니다.

MUTE기능을 해제하고 싶은경우  버튼을 짧게 (1초이내) 누르면 됩니다.

## 레벨설정

- 본 제품은 8단계의 에너지 레벨(Energy Level) 설정이 가능합니다.  
카트리지는 제모용 H형 카트리지가 기본으로 포함되어 있습니다. ( H형 : 1 ~ 8레벨 )  
카트리지 피부용(D형)은 옵션입니다(별도구입)
- 레벨(Level)이 높을수록 높은 효과를 얻을 수 있지만 피부의 홍반이나 통증 등이 있을수 있으니 피부상태에 따라 레벨을 낮추어서 사용하여 주십시오.
- 처음 사용하는 분은 「레벨1」부터 사용하는 것을 권장합니다.  
최초 작동 시에는 에너지 레벨이 「레벨1」에 자동적으로 설정되어 있습니다.  
에너지 레벨은 (+)(-)버튼으로 설정하여 주십시오.
- 피부색이 어두운 분들은 통증을 유발하거나 화상을 입을 수 있으니 사용을 자제하여 주십시오.  
본 설명서의 뒷 표지에 인쇄된 'SKIN TONE SAFE CHART' 색상을 보시고 사용가능한 레벨을 확인해 주십시오.



### 상식 열이완시간이란?

물체가 열을 흡수하면 그 온도가 올라가는 한편 열을 주변으로 발산하여 식는 과정이 진행된다.  
같은 열을 가할 경우 물체의 부피가 클수록 온도가 일정 수준으로 상승하는데 시간이 오래 걸릴 뿐 아니라,  
열의 공급을 중단한 후 원래 상태로 온도가 하강하는 데에도 시간이 오래 걸린다.  
어떤 물체에 열이 가해져서 온도가 올라간 뒤 식는 과정이 진행되어 올라간 온도의 반까지 떨어지는데 걸리는 시간을  
열 이완 시간이라고 한다.

열이완 시간은 개인의 차가 있을 수 있으므로 조급하게 조사(Flash)를 하지 않는 것이 피부건강에 좋습니다.




| 사용팁 & 주의사항

## 효과적인 사용방법

### ▶ BODY(제모용 H형 카트리지)에 사용시

1. 하루전날 모발을 깨끗이 제거합니다. 단 모발을 뽑거나 뽑은 부위에 사용하시면 안됩니다.
2. 사용전에는 피부를 부드러운 풀으로 깨끗이 세안합니다.
3. 건성피부는 레벨을 최대한 낮게 조사(Flash)하십시오.
4. 사용하시면서 피부에 홍반 등이 발생하면 사용을 멈추고, 차가운 팩과 보습제 등으로 열감을 낮춰야 합니다.  
홍반 부위는 피부에 따라 개인차가 있지만 2~3일 후면 모두 없어집니다. 만약 홍반 부위가 신경이 쓰인다면 가까운 병원을 방문하여 전문의와 상의하십시오.
5. 동일 부위를 연속으로 사용하는 것은 금하며, 피부의 상태에 따라서 1회 시술시 1~3회 사용하며, 1주일에 1~3회 일정한 간격으로 나눠 사용하십시오.
6. 시술 후, 보습제와 자외선 차단제를 꼭 바른후 옷소매 또는 바지 등으로 시술부위를 가지고 생활 하시면 색소침착 등으로 부터 보호가 될 수 있어 권장합니다.( 단, 자외선 차단제는 매일 바릅니다. )

※ 제모용 카트리지사용시 눈에 보안경을 꼭 착용하십시오.

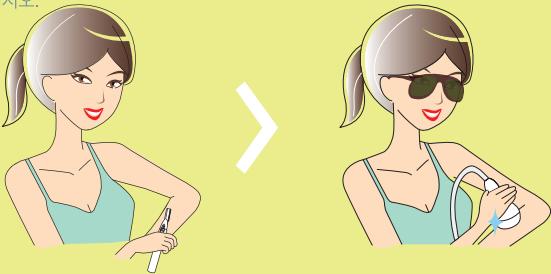

### ▶ FACE(D형 카트리지)에 사용시

1. 사용전에는 세안(클렌징 및 각질제거)을 꼭 하십시오.
2. 따뜻한 스팀 또는 타올로 피부를 진정 시킨 후 사용하세요.
3. 낮은 레벨(1~2레벨 권장)에서 사용하시되, 눈썹이나 머리카락에 손상이 없도록 주의하시고, 코와 볼등에 시술 시에는 카트리지의 필터(석영)가 피부에 닿지 않도록 조심하십시오. (필터의 표면이 뜨거워 화상을 입을 수 있습니다.)
4. 동일 부위를 연속으로 사용하는 것은 금하며, 피부상태에 따라서 1회 시술시 1~3회만 사용하며, 1주일에 1회 사용을 권장합니다.
5. IPL사용후, 비타민C의 사용을 금하며, 만약 사용하고 싶다면 격주제로 사용 할 것을 권장합니다.  
(1주일은 IPL사용후 보습제 및 팩사용, 다음주는 IPL사용을 금하며, 비타민C등을 사용)
6. 시술 후, 차가운 보습제 / 마스크팩을 이용하시면 피부건강에 좋습니다.
7. 시술 후, 썬크림을 바르고 외출을 하십시오.

※ 얼굴에 사용시 눈에 보안경을 사용하시고, 보안경을 벗고 사용할 경우는 빛이 눈에 들어가지 않도록 주의 하십시오.

## 사용후 주의사항

### ▶ IPL사용후 조심해야 할 사항입니다.

- 시술 후 열감을 낮추도록 보습제를 바르세요.(지속적으로 건조한 피부에 발라줍니다.)
- 시술 후 온수 목욕은 삼가하세요.
- 시술부위를 문질러서 자극을 주지 마세요.
- 붉은점이 남아있는 동안은 직사광선을 피하고, 색소침착 방지를 위해 자외선 차단제를 사용하세요.
- 홍반이 2~3일 지속될수 있지만 호전되므로 안심하시고, 불편하면 가까운 병원을 방문하여 전문의와 상담하세요.
- 4주이상은 자외선에 노출되지 않게 소매있는 옷과 바지를 착용하고 썬크림을 꼭 발라 주세요.  
( IPL을 더이상 사용하지 않는 경우에도 4주이상은 자외선 차단제를 계속 매일 발라줍니다. )
- 거드랑이 시술후에 제한제(땀억제 약)의 사용을 2주일정도 삼가하세요.

### ▶ 램프 카트리지 사용시 다음 사항을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.


- 본 제품을 사용하는 경우는 시력 보호를 위해 자외선차단 고글을 반드시 착용해 주시기 바랍니다.
- 피부색에 따른 레벨선정 및 예외사항은 설명서 표지를 참조하여 주십시오.
- 조사하�다 보면 조사부의 석영이 뜨거워질 수 있으므로 이럴때는 조금 기다렸다가 열이 식으면 다시 조사해야 합니다.
- 레벨선택은 신중히 해야 합니다.
- 램프카트리지에서 나오는 빛을 눈으로 직접 보거나 사람의 눈을 향해 사용하지 않도록 하여 주시기 바랍니다.
- 본 제품의 사용 전, 사용 후에 꼭 램프 상태를 확인해 주시기 바랍니다.  
램프카트리지에 착색 또는 흙색반점의 오염이 부착된 경우나 파손되어 있는 경우 반드시 램프카트리지를 새 제품으로 교환하여 주시기 바랍니다.
- 사용 중에는 카트리지를 피부에 대고 강하게 누르지 마십시오.
- 제품 사용 시 환부 한 곳에 집중조사하여 사용하지 마십시오.

### ▶ 본 제품은 다음과 같은 증상이 발생할 우려가 있습니다.




- 화상이나 물집이 발생할 우려가 있습니다.
- 사용한 부위에 열이나 따끔거리는 통증, 가려움을 일으킬 수 있습니다.
- 사용직후나 24시간 이내에 시술한 부위가 홍반을 띠거나 부풀어 오르는 경우가 있으나, 2~3일이 경과되면 모두 없어집니다.  
증상이 치료 될 때까지 많은 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 사용 직후에 피부색이 진하게(색소침착) 되는 일이 있습니다.  
사용 중에 따끔거리는 통증을 느낀 경우, 또는 사용 후 피부가 흉조를 띠었을 경우 곧바로 차가운 물수건이나 얼음 등으로 냉찜질 등 마사지를 하여 주시기 바랍니다. (전문의와 상의할 것을 권장합니다.)
- 사용 후 외출시 자외선 차단제 사용을 권장합니다.

### ▶ 다음과 같은 증상이 발생한 경우는 시술을 멈추고 전문의와 상담하여 주시기 바랍니다.

- 화상이나 수포가 발생한 경우
- 사용 부위가 빨갛게 일어나고 가려움 등이 발생한 경우
- 색소침착이 장기간(2~3일)에 걸쳐 일어난 경우

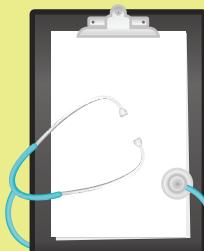


## 램프카트리지 교환방법

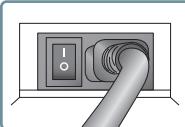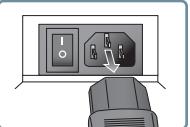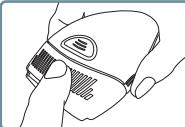
- 1  뒷면의 AC 전원스위치를 꺼 주십시오.
- 2  전원코드를 AC 코드 삽입부에서 분리하여 주십시오.
- 3  프로브(Probe) 양쪽면 후크(HOOK) 손잡이를 누르고 카트리지의 위 아래를 잡고 상하로 가볍게 흔들어 프로브에서 카트리지를 분리합니다.
- 4  다른용도의 램프카트리지로 교환하여 프로브구멍 (PROBE HOLE)에 맞게 장착합니다.
- 5 수명을 다한 카트리지는 쓰레기통에 분류하여 폐기하여 주십시오.

## 램프카트리지의 종류

램프카트리지는의 종류는 2가지이며 “제모용”, “피부용”이 있으며, 각 램프 카트리지에는 아래와 같이 용도 표기가 되어 있습니다.

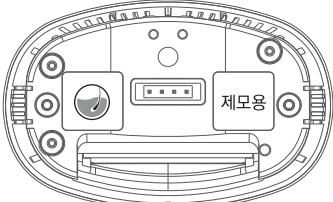

\* 제모용 카트리지 – 제모에 효과적인 카트리지이므로 제모용으로 사용해주세요.

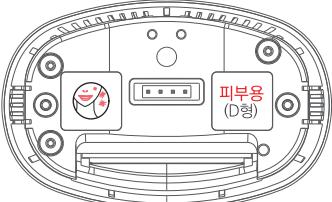

\* 피부용 카트리지 – 피부질환으로 효과적인 카트리지이므로 피부질환 치료용으로 사용해주세요.

## 램프카트리지 수명

램프카트리지는 소모품이며 수명이 있습니다.

1~2단계 : 6만 Shot, 3~5단계 : 2만 Shot, 6~8단계 : 1만2천 Shot

본 기기는 램프카트리지 수명을 자동으로 계산하도록 프로그램 되어 있으며, 각 단계별 사용횟수를 합산하여 최고 60,000 Shot ~ 최저 12,000 Shot 으로 계산합니다.

램프카트리지 수명이 90%가 되면 램프교환 LED가 점멸되어 교환시기를 알려줍니다. (반드시 교환해 주세요.)

## 청소방법

- 본체 : 사용 후에 본체뒤의 AC전원 스위치를 OFF시킨 후 전원 코드를 분리하여 부드러운 천 등으로 가볍게 먼지나 오염물을 닦아 주십시오.
- 프로브 : 사용이 끝난후에는 반드시 필터 부분을 청소하여 주십시오.  
물로 희석한 중성 세제 또는 알코올을 부드러운 천에 묻혀 램프 유리면에 붙은 이물질을 천천히 닦아낸 후 마른 형검 등으로 가볍게 닦아내고 건조시켜 보관하시기 바랍니다.

오염부가 심하면 시중에 판매되는 소독용 알콜을 부드러운천에 묻혀서 사용하십시오.

제품 청소 시 다음 사항은 반드시 숙지하시기 바랍니다.



경고

본체, 프로브, 램프 카트리지 등을 물로 청소하지 마십시오. 감전이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.



주의

청소 시 신나, 벤젠류를 사용하면 변형, 변색의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.



## 보관방법

- 본 기기에 대한 보관 조건은 통풍이 잘되고 습하지 않으며, 유해화학성분이 없는 곳에 보관한다.
- 직사광선이 없는 곳에 보관한다.
- 소비자권장 보관온도 5~35°C, 소비자권장 보관습도 20~80%(상대습도)

증상	조치사항
Q. 전원이 들어오지 않아요.	A. 전원코드가 본체와 콘센트에 꽉 끼워져 있는지 확인하세요. A. 제품 뒷면의 AC전원 스위치가 ON 상태인지 확인하여 주세요.
Q. 플래시 버튼을 눌러도 빛이 나오지 않아요.	A. 프로브의 충전 완료 램프가 백색으로 점등되었는지 확인하세요. A. 10초가 지나도 충전 완료 램프가 점등 되지 않는 경우에는 본체 전원을 끈 후 다시 켜주세요. A. 예러(Error) 램프가 점등되었다면 본체의 전원을 끈 후 다시 켜주세요. A. 피부에 플래시 면이 바르게 밀착되어 있는지 확인하세요. 사용부위에 프로브를 평행으로 밀착시킨후 버튼을 누르세요. A. 프로브와 카트리지가 바르게 장착되어 있는지 확인하세요.
Q. 예러 램프가 점등됐어요.	A. 카트리지 장착이 확인되지 않는 경우가 있습니다. 뒤쪽 AC전원 스위치를 OFF하고 카트리지 장착을 확인한 다음 전원을 다시 ON으로 해주세요.
Q. 전원은 들어오지만 충전 완료 램프가 점등 하지 않아요.	A. 예러 램프를 확인 해주세요. 10초가 지나도 충전 완료 램프가 점등하지 않으면 전원을 끈다가 다시 켜주세요. 오랜 시간 사용하셨다면 전원을 OFF하고 30분 정도 기기를 식혀주세요.



- ▶ 품목명 : 펄스광선조사기
- ▶ 제조번호 : 제품 하단 및 포장박스에 표기
- ▶ 보증기간 : 본체 구입일로부터 1년(램프카트리지는 소모품이므로 보증에서 제외)

▶ 고객명 :

▶ 주소 :

▶ 전화 :

▶ 판매점상호 :

▶ 주소 :

▶ 전화 :

▶ 고장 및 수리내역 :

▶ 보증규정

1. 보증기간내에 사용설명서대로 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장발생시, 고장성 둘째에 한하여 무상서비스를 받을수 있습니다. ( 단, 소모품, 부속품 등은 제외 )
2. 보증기간내에도 다음과 같은 경우는 무상서비스가 불가능합니다.
  - ① 보증서가 없을 경우, 또는 보증서에 구매년월일, 고객명, 판매점명 등이 없거나 위조하여 작성한 경우.
  - ② 현재지변(화재, 열해, 수해 등)에 의한 고장 및 손상된 경우.
  - ③ 사용설명서의 주의사항을 지키지 않아서 고장난 경우.
  - ④ 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장난 경우.
  - ⑤ 푸로맥스에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하거나 이동중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 경우.
3. 프로브 코드선과 스위치 류는 교체품으로 사용자의 사용습관 및 환경에 따라 교체 주기가 단축 될 수 있으며, 보증기간내에도 소비자 과실로 판명될 시 유상 청구될 수 있습니다.
4. 보증서비스는 구매한 판매점 또는 당사에 의뢰하십시오.
5. 이 보증서는 대한민국에서만 적용됩니다.
6. 보증서비스는 개인용에 한하여 유효합니다.  
SPA, 에스테틱 하우스 등 영업용도로 전환하여 사용한 경우 보증서비스를 받을 수 없습니다.

▶ 본 제품은 의료기기입니다.

품목명	펄스광선조사기
모델명	ANYMI IPL-2000
전원	AC100~240V, 50/60Hz, 250VA
광원	제논램프
카트리지수명	약 60,000회 (Level1 기준)
피부질환용 플래시크기	3.2cm x 2.2cm
본체크기	236mm(W) x259mm(D) x167mm(H)
중량	1.512Kg ( 본체 1.4Kg, 프로브 0.081Kg, 램프 카트리지 0.031Kg )

▶ 의료기기법에 의한 표시사항

1. 제조원 : (주)푸로맥스
2. 제조국 : 대한민국
3. 주소 : 경기도 부천시 오정구 산업로7번길 21 9층(오정동, 일우빌딩)
4. 제조업 허가번호 : 제2594호
5. 제조품목 허가번호 : 제허 13-1919호
6. 제조번호 : 제품 생산 시 기재
7. 제조년월일 : 제품 생산 시 기재
8. 중량 : 1.512Kg ( 본체 1.4Kg, 프로브 0.081Kg, 램프 카트리지 0.031Kg ), 포장단위 : 1대
9. 사용방법 및 사용상의 주의사항 : 본 설명서에 기재
10. 제품의 사용목적 : 에너지의 세기가 큰 펄스형태의 빛(IPL)을 방출시켜 피부질환치료 등을 위해 사용하는 기구
11. 본 제품은 '의료기기'임
12. 작성연월 : [제정]2014년 8월 8일, [Rev.3] 2015년 6월 22일



식품의약품 안전처

SKIN TONE  
SAFE CHART



1~4단계

주의 위험

PL2000-PL2000-KOR-201501A



스마트폰으로 큐알코드를 찍으시면 사용설명서와 동영상을 보실 수 있습니다.  
모바일홈 [anymi.co.kr/m](http://anymi.co.kr/m)



제조원 : 주식회사 푸로맥스  
판매원 : 주식회사 앤미

고객센터 : 1800 6240